





HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

LF01142 - Trenažér auskultace a Smartscope
Objednací kód: **4107.LF01142**

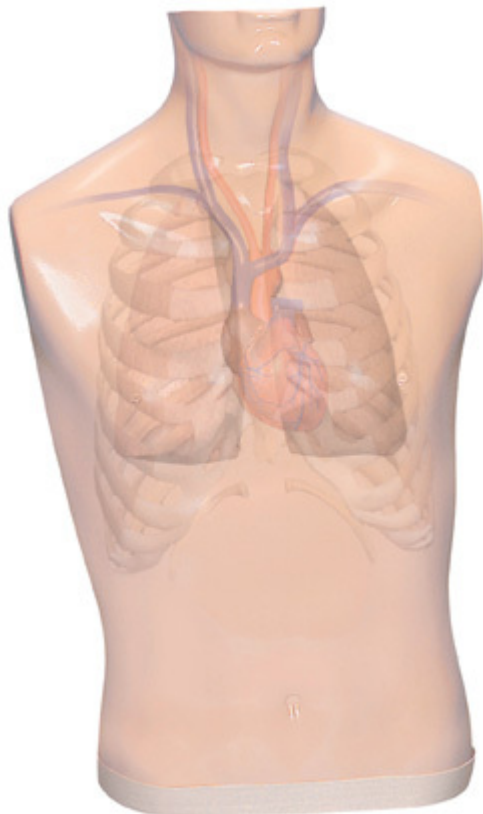

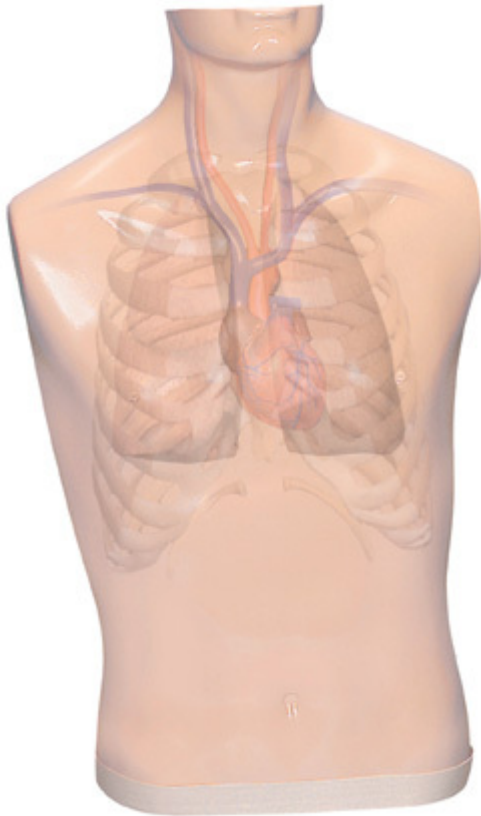

Cena bez DPH

117.000,00 Kč

Cena s DPH

141.570,00 Kč

Parametry

Klinické dovednosti - filtr

Auskultace

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis
- instruktor vybere z menu pomocí dálkového ovladače stav srdce a plic
- student musí pohmatem najít správná auskultační místa a pomocí Smartskop přiloženého na různá místa figuríny bude poslouchat různé srdeční a plicní zvuky
- diagnózu stavu zvoleného instruktorem lze stanovit srovnáním zvuků objevujících se na různých místech jako u skutečného pacienta
- plicní zvuky lze poslouchat na zadní straně modelu a auskultaci srdce mohou studenti nacvičovat na sedmi místech na přední straně, srdeční zvuky se při každém stavu mění podle toho jak student poslouchá na tom či onom místě
- zvuky jsou slyšitelné jenom po přiložení fonendoskopu na správná poslechová místa
- dálkové ovládání nemusí být při používání nasměrováno přímo na figurínu nebo fonendoskop
- jeden dálkový ovladač může současně obsluhovat několik sad Smartskopů a figurín
- výborně se hodí pro skupinovou výuku, rozsah skupiny je omezen na 30 metrů dosahu dálkového ovládání
- auskultační trenažér obsahuje:
 - figurínu
 - dálkový ovladač s LCD displejem
 - Smartskop s jednoduchými nebo duálními naslouchadly
 - 3 baterie AAA
- Pomocí dálkového ovládání můžete naprogramovat následující srdeční stavy:

1. Normální
2. Aortální regurgitace
3. Plicní stenóza
4. Mitrální stenóza
5. Celá fáze systoly
6. Střed systolické fáze
7. S3 rytmus
8. S4 rytmus

9. Systolické zmáčknutí
10. Síňová septální vada
11. PDA
12. VSD

- Pomocí dálkového ovládání můžete naprogramovat následující plicní stavy:

1. Normální plíce
2. Normální vezikulární
3. Dýchavičnost
4. Jednoduché sípání
5. Jemné praskání
6. Hrubé praskání
7. Praskání
8. Chrčení
9. Dutinové dýchání
10. Bronchovezikulární
11. Průduškový
12. Plicní edém
13. Dítě
14. Tření při mazání kůže
15. Vlastní vnitřní zvuky
16. Poslech zvuků řeči skrz hrudní stěnu

Náhradní díly

- LF01144 - Smartskop
- LF01148 - Dálkové ovládání
- LF01145 - Figurína
- SB20146 - Reproduktoři

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše