




HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

AR351 - Figurína pro nácvik zmírnění bolesti  
Objednací kód: **4101.AR351**





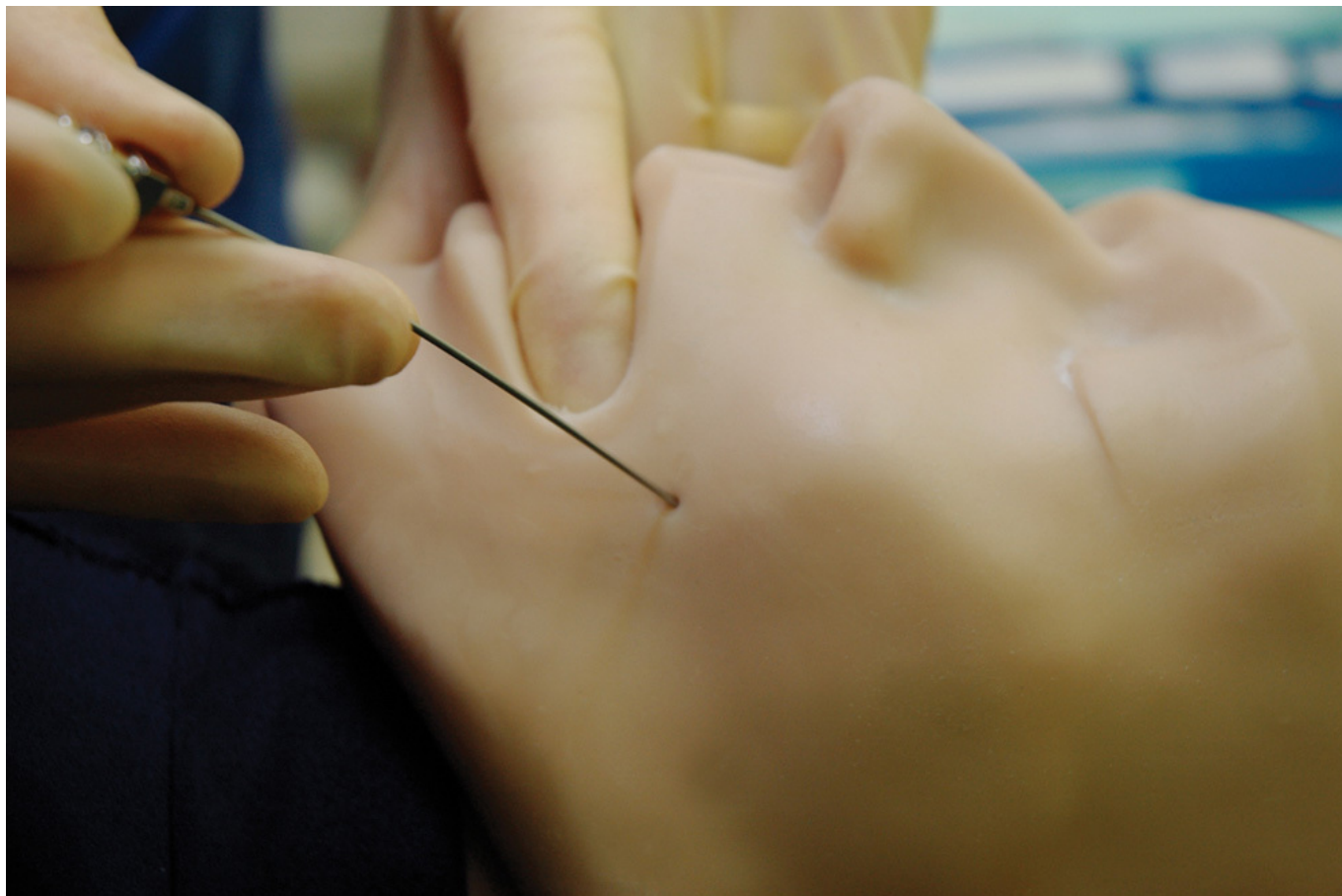

Více obrázků

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Trup

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis
- Tato figurína byla vytvořena zkušeným anesteziologem ze Salfordského centra bolesti v Manchesteru.
- Správné zacílení jehly je potřebné pro zajištění účinnosti diagnostických bloků a je nezbytné při použití neurolytických roztoků. Radiologická kontrola polohy jehly by měla být rutinní a prakticky nacvičena.
- Pokusy o lokální anestézii praktikanty, kteří nemají tyto techniky zažité, mohou pro pacienty znamenat nepříjemné a zdlouhavé procedury.
- Figurína se skládá z plastové lidské kostry natřené baryovou barvou a pokryté pěnovou gumou a umělou kůží, na které mohou praktikanti procvičovat zavedení jehly pod rentgenovým zesilovačem. Nízká rentgenová densita figuríny umožňuje v průběhu simulovaných procedur použití redukováných dávek záření.
- Dovednosti, které lze na figuríně demonstrovat:
  - znalost povrchové anatomie aplikované na jednotlivých nervových blocích
  - orientace obrazu a identifikace příslušných rentgenových anatomických bodů
  - určení bodu pro vpich jehly a úhlu zavedení
  - rozpoznání kontaktu s hlubokými kostními strukturami
  - princip vytažení a zacílení jehly pod jiným úhlem
- Cílovým bodem simulace je správný rentgenový obraz pozice hrotu jehly pro aplikaci kontrastní látky. Dříve získané příklady průniku kontrastní látky mohou být poté pomocí počítače a monitoru použity pro další simulační scénáře.
- Model je dodáván v atraktivním přenosném kufříku.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše