




HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

S315.500 HAL® Trenažér CPR + D pro nácvik KPR - dospělý
Objednací kód: **4108.S315500M2**



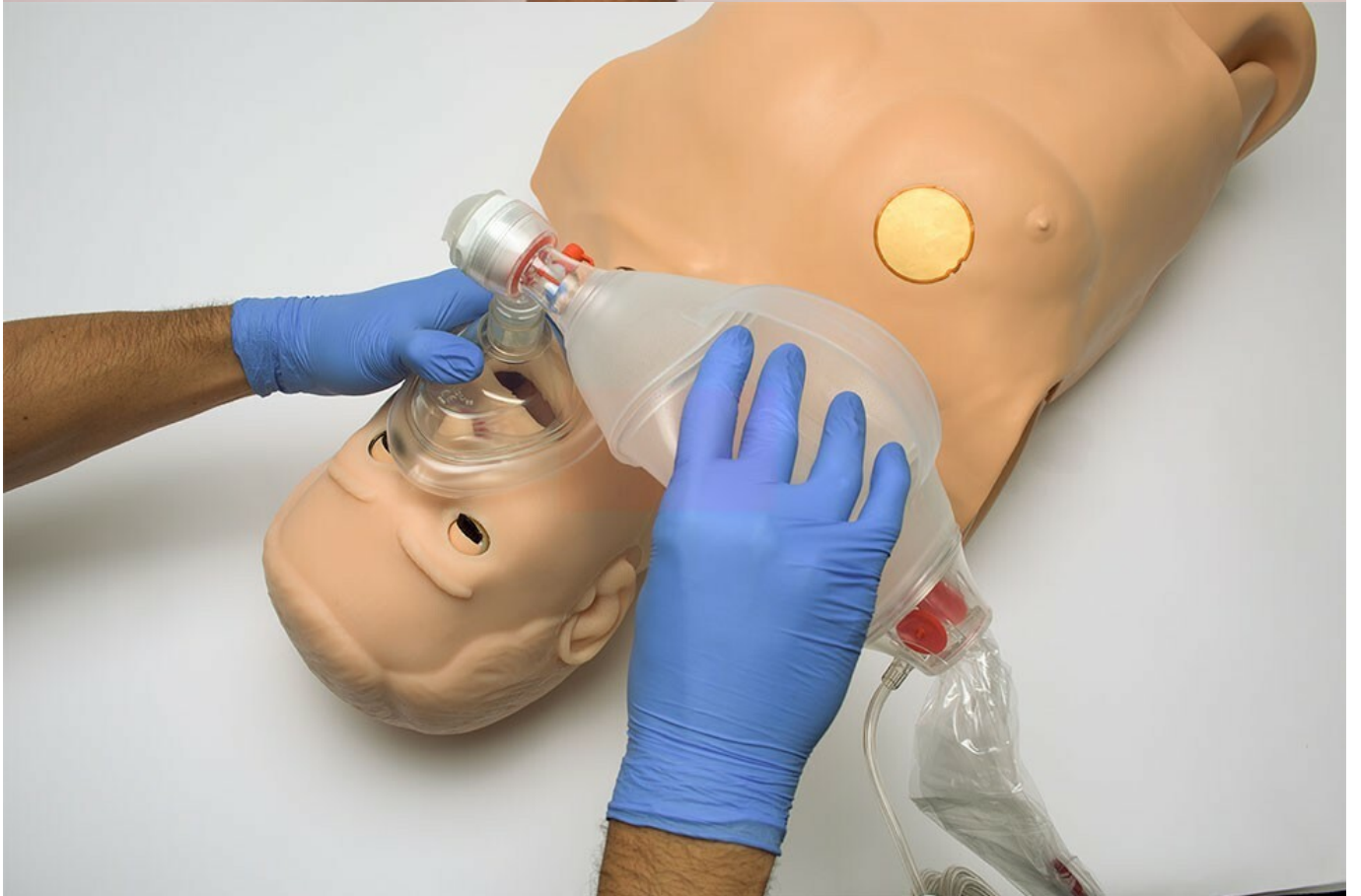



Více obrázků

Cena bez DPH

102.000,00 Kč

Cena s DPH

123.420,00 Kč

Parametry

Provedení

Torso dospělého

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Inovativní zelená technologie Gaumard umožňuje HAL® Adult CPR+D Skill Trainer Torso ukládat energii generovanou kompresí hrudníku do baterie pro provoz simulátoru. Bez použití baterií nebo napájecích kabelů je HAL® schopen zaznamenávat metriky kvality a výkonu KPR, představující realistické zvednutí hrudníku a hmatatelné pulzy po resuscitaci a další. Přeneste svůj trénink na více míst a oslovte více lidí s pohodlím skutečně bezdrátové technologie.

Funkce

- Intubovatelné dýchací cesty s jazykem, hlasivkami a průdušnicí
- Oči lze otevřít nebo zavřít
- Normální, mioza (stažená) a mydriáza (nafouknutá) zornice
- Nezávislé stavy levé/pravé zornice simulují konsenzuální a nekonsenzuální reakci
- Realistický sklon hlavy/zdvih brady a přítlak čelistí
- Realistická hrudní dutina umožňuje studentům zažít správnou sílu potřebnou k provedení správného stlačování hrudníku
- Anatomicky správné orientační body pro správné umístění ruky
- Připojte skutečné elektrody AED přímo na vodivou kůži a šokujte simulátor pomocí defibrilátoru stejně jako skutečný pacient. Váš AED zobrazí EKG simulátoru.
- Automatické pulzy a dýchání s realistickým zvedáním hrudníku.

Alternativní energie

- Elektronika poháněná stlačováním hrudníku; 30 kompresí uvede systém do provozu.
- Simulátor zůstává během tréninku nabitý a sám se dobíjí, zatímco student cvičí KPR.

- Žádné baterie k výměně. Zařízení pro ukládání energie schopné 500 000 cyklů.

Během nácviku

Pro studenty:

- Režim Coach: slyšitelné tóny vedou stlačování hrudníku
- Testovací režim: během testu nejsou poskytovány žádné pokyny

Pro instruktora:

- Obrazovka na ručním ovladači zobrazuje hloubku komprese a objem ventilace ve snadno interpretovatelném formátu sloupcového grafu
- Obrazovka vyzve instruktora, když musí student komprimovat „rychleji“ nebo „pomaleji“, „hlouběji nebo méně hluboko“.
- Instruktor může zobrazit míru komprese v reálném čase
- Obrazovka zobrazí energii podaného defibrilačního výboje

Po nácviku

Instruktor sleduje výkon studentů včetně:

- Průměrná rychlost kompresí za minutu
- Procento kompresí ve správném rozsahu rychlosti
- Průměrná hloubka komprese
- Procento stlačení ve správném rozsahu hloubky
- Procentuální ventilace ve správném rozsahu objemu ventilace
- Skutečný poměr komprese/ventilace (C/V).
- Délka cvičení
- Doba nečinnosti
- Metriky hlášení jsou uloženy ve flash paměti ovladače a lze je přenést do počítače pomocí portu USB ovladače.

Ovládání

- Úprava/změna zpětné vazby a metrik přehledů:
- Správný poměr C/V
- Limity pomalé a rychlé komprese
- Vysoké a nízké limity hloubky komprese (v palcích nebo centimetrech)
- Správný objem ventilace
- Manuální kardioverze po defibrilaci
- Programujte rytmy EKG; zvolte sinus, ventrikulární fibrilaci nebo asystolii. Vybraný rytmus EKG bude vidět na vašem skutečném AED.
- Aktivujte automatický karotický puls a/nebo dýchání

Sada obsahuje

- Hlava a horní část těla dospělého muže v životní velikosti
- Ruční ovladač s kabelem 4,5 m
- Přenosná taška
- Návod k obsluze

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše