



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096



E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

KBWF240 - Růstová komora s osvětlením a nastavitelnou vlhkostí, BINDER
Objednací kód: **2103.90200336**





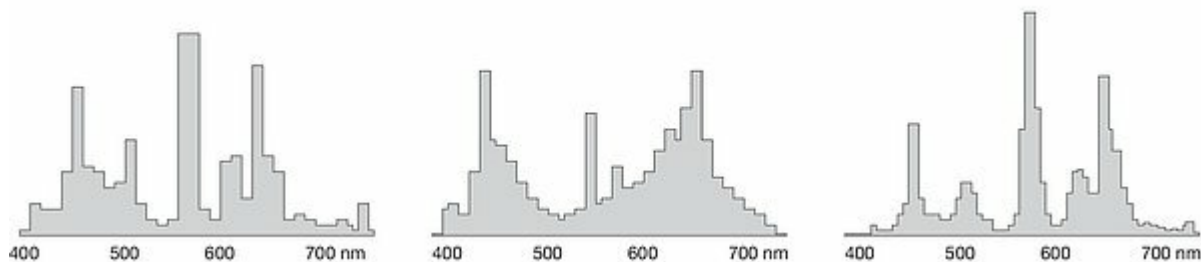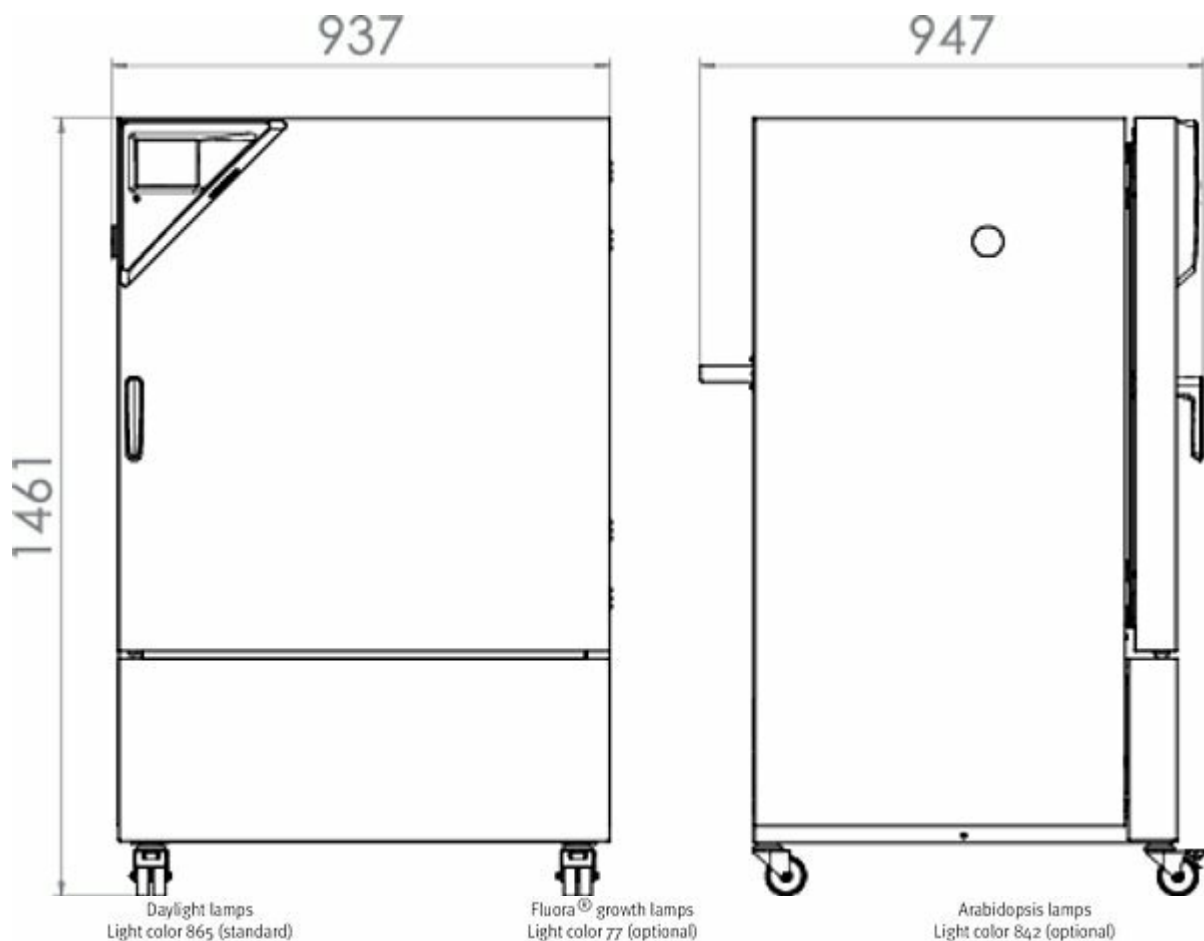

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem [l]	247
Teplotní rozsah [°C]	0 až 70 (s osvětl. 10 až 60)
Série	KBWF
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis
- Teplotní rozsah: 0 °C až 70 °C
- Teplotní rozsah s osvětlením: 10 °C až 60 °C
- Rozsah vlhkosti: 10% až 80% relativní vlhkosti
- 2 polohovatelné osvětlovací kazety, každá s 5 zářivkami
- Technologie přehřívací komory APT.line™
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
- Regulace vlhkosti s kapacitním vlhkosním čidlem a parním generátorem
- Intuitivní ovládání na dotykové obrazovce s programováním časových segmentů v reálném čase, s interním nahráváním dat
- 2 rošty z nerezové oceli
- Přístupový port se silikonovou zátkou, 30 mm, vlevo
- Nezávislá teplotní ochrana třídy 3.1 (DIN 12880) s vizuálním a akustickým alarmem teploty
- Počítačové rozhraní: Ethernet
- Ohřev dveří

Klimatické komory s osvětlením a nastavitelnou vlhkostí jsou vhodné pro širokou škálu úkolů:

Růstové komory BINDER řady KBWF jsou standardně dodávány s osvětlovacími kazetami které mohou být umístěny variabilně. Trubky pro růst rostlin s ideálním spektrem pro fotosyntézu jsou k dispozici jako možnost simulace dokonalých klimatických podmínek v rostlinné biotechnologii, dřevařském a lesnickém průmyslu a zemědělském průmyslu. Tyto **komory jsou také vhodné pro použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, pro základní výzkum při zajišťování jakosti a pro testování materiálů.**

Klimatické komory BINDER jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a zaručují neustálý a přesný výkon.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše