

Airway Management



Head Tilt



OPA insert



NPA insert



I-gel insert



ETT insert



Chest rising



Lift epiglottis

Chest Compression



Incomplete recoil



Over-compression



AED Training




Chest Compression &
Ventilation



Insert
NPA / OPA



ETT Intubate

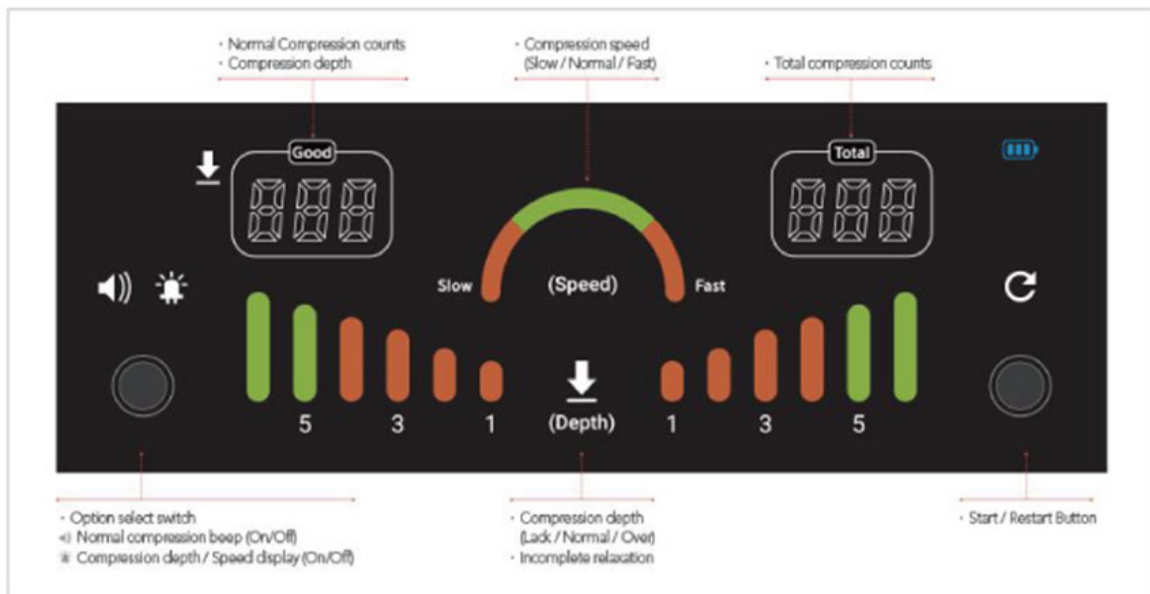

Cena bez DPH

66.550,00 Kč

Cena s DPH

80.525,50 Kč

Parametry

Provedení

Torso dospělého

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Vlastnosti

- Návčiv kompresí hrudníku, zajištění dýchacích cest a ventilací pro základní resuscitaci
- Intubace za použití laryngoskopu

- Zavádění orálního nástroje pro zajištění dýchacích cest (OPA) nebo nazálního nástroje (NPA) do figuríny
- Přichycením dostupných magnetických nálepek na elektrody AED trenážeru nemusíte elektrody používat zcela permanentně
- Odezva na komprese hrudníku se zobrazuje na LED panelu na břiše
- Návčik a vyhodnocení KPR pomocí softwaru
- Možnost prohlížet výsledky vyhodnocení a jejich tisk pomocí softwaru
- Samostatný návčik KPR s tabletem nebo notebookem / skupinový návčik až s 30 figurínami najednou

Specifikace

Zajištění dýchacích cest

- Záklon hlavy/zdvih brady, manévr předsunutí čelisti
- Ventilace pomocí resuscitační masky s vakem
- Zavádění OPA/NPA
- Intubace pomocí laryngoskopu
- Intubace pomocí endotracheální trubice (ETT), laryngální masky (LMA/I-gel), Combi-Tube
- Pozorovatelný zdvih hrudníku během ventilace
- Zvuk cvaknutí předních zubů v důsledku nadměrného použití laryngoskopu

Komprese hrudníku

* Bezdrátové spojení mezi figurínou a tabletem/chytrým telefonem přes Bluetooth

- Snadno použitelný a uživatelsky přívětivý software
- Možnost vyhodnocovat až 30 figurín najednou; tablet, tiskárna a laptop jsou volitelná příslušenství
- Změňte před návčikem vodící linii pomocí softwaru
- Zobrazujte hloubku kompresí, frekvenci kompresí, pozici rukou a také objem ventilace pomocí softwaru
- Prohlížejte si výsledky po návčiku a ukládejte/tiskněte je pomocí softwaru
- Exportujte výsledná data (statistické výsledky) do formátu Excelu
- Skóre výsledků z návčiků a pořadí uložených skóre
- Vyberte si mezi návčikovým a vyhodnocovacím módem

*LED displej zabudovaný ve figuríně

- Odezva v reálném čase na hloubku a frekvenci kompresí hrudníku pomocí LED světla
- Zobrazujte celkový počet kompresí a počet správných kompresí
- Zobrazujte okamžitou hloubku komprese
- Detekujte nekompletní zpětný ráz
- Detekce správné komprese hrudníku, když je dobrá hloubka a frekvence, a zvuková odezva (zvuk lze zapnout/vypnout)
- Zobrazujte odezvu na objem ventilace a dobu výdechu
- Zobrazujte celkový počet ventilací a počet správných ventilací
- Zobrazujte objem ventilace

*Tělo figuríny

- Pozorovatelný zdvih hrudníku během ventilace
- Díky magnetickým nálepkám přichyceným na elektrodách AED trenážeru nemusí být podložky použity zcela permanentně
- Skladovací tašku lze použít jako návčikovou podložku
- Použijte baterie/AC adaptér

Součásti sady

- 1 torzo dospělého
- 1 skladovací obal
- 1 lubrikant pro intubaci
- 1 AC adaptér, uživatelská příručka

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše