




HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

P93SPC-S - Katetizační sada PRO
Objednací kód: **4111.1023010**





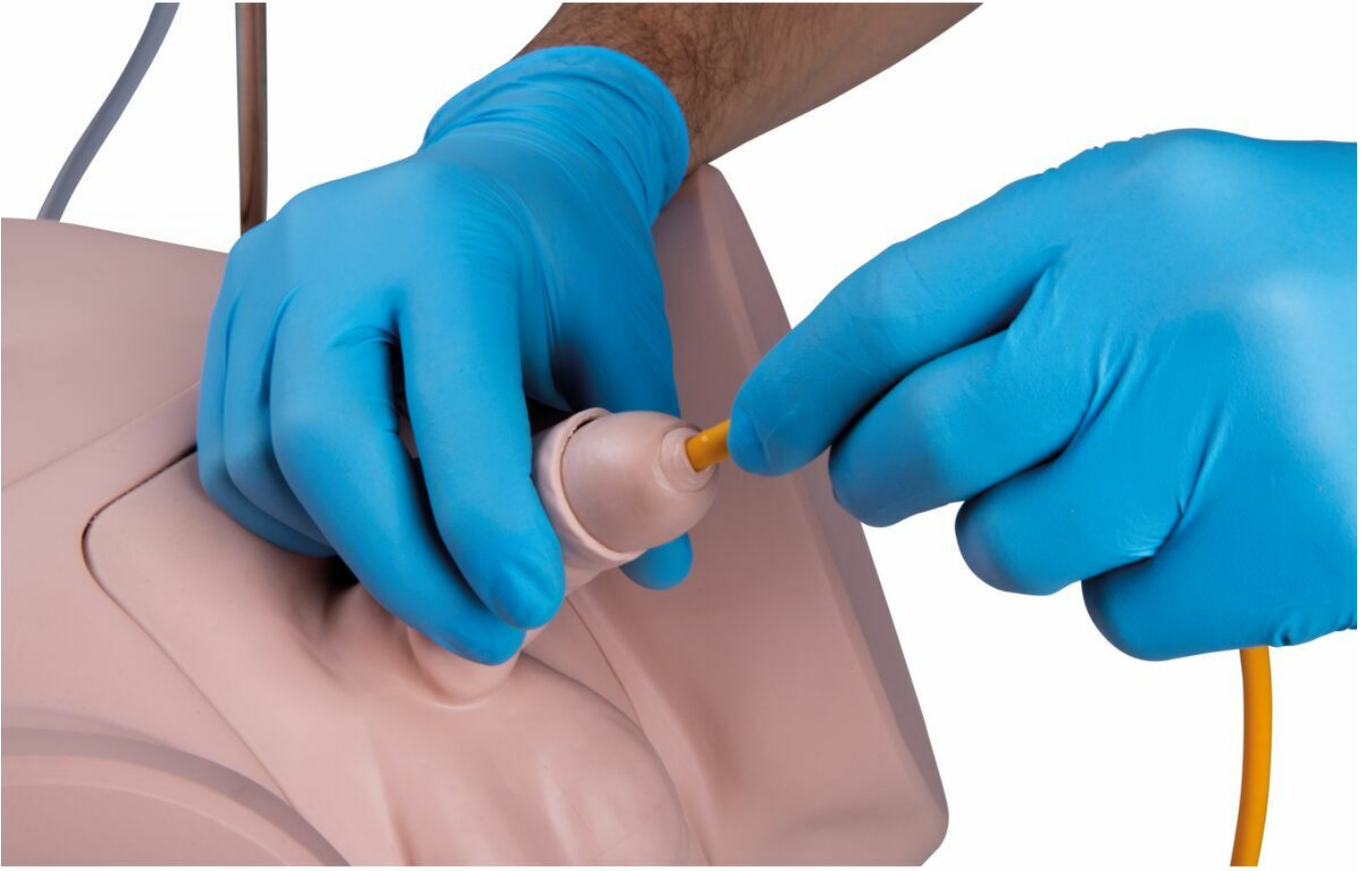



Více obrázků

Cena bez DPH

36.320,00 Kč

Cena s DPH

43.947,20 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

Se sadou P93 PRO pro nácvič katetrizace lze realisticky demonstrovat, nacvičovat a vyhodnocovat katetrizaci jak mužského, tak ženského močového měchýře. Katetrizaci lze provádět jak přes močovod (transuretrální), tak přes břišní stěnu (suprapubická).

Snadno vyměnitelné genitální vložky jsou umístěny do anatomicky přesného modelu spodní části břicha a jsou zde upevněny pomocí magnetů. Obě genitální vložky jsou vyrobeny z měkkého a pružného materiálu: předkožka a pysky jsou pohyblivé a penis je pružný. Takto mohou studenti nacvičovat všechny nezbytné postupy pro katetrizaci. Díky materiálu genitálních vložek je pocit při zavádění a vyndávání katétru z měchýře velmi realistický s realistickým odporem a hloubkami zavedení.

Přímá výuka:

Na mužské genitální vložce lze nastavit 3 různé úrovně zúžení močovodu. Při nastavení největšího zúžení není katetrizace možná, což vede k závěru, že je nutné provést suprapubické zavedení katétru.

Výměna a zavádění suprapubického močového katétru:

Pokud již není možná katetrizace přes močovou trubici, je nutné zavést suprapubický katétr. Suprapubický katétr obvykle lékař zavádí přes břišní stěnu do naplněného močového měchýře a fixuje ho k břišní stěně. Verzi PRO lze použít pro nácvik výměny suprapubického katétru a péče o něho. Nácvik péče zahrnuje výměnu obvazu, čištění katétru a dezinfekci rány.

Výhody katetrizačních simulátorů P93 PRO v několika bodech:

- Ženská a mužská katetrizace s realistickým odporem
- 3 nastavitelné úrovně zúžení močovodu
- Měkká a pohyblivá předkožka a pysky (např. pro nácvik dezinfekce)
- Anatomicky realistická struktura pánve
- Výtok tekutiny při úspěšném provedení katetrizace
- Postupy lze pozorovat přes průhledný měchýř a břišní stěnu lze odejmout
- Nácvik výměny suprapubického katétru a jeho čištění a péče o něj
- Protiskluzové nohy zajišťují stabilitu simulátoru
- Magnetické konektory pro rychlé uchycení a odpojení genitálních vložek
- Snadné čištění a údržba, simulátor lze zcela rozebrat
- Houbovitý materiál uvnitř zamezuje tvorbě vlhkosti

Obsah sady:

- Realistický model spodní části břicha
- Mužská a ženská katetrizační sada s průhledným močovým měchýřem
- Lahev a trubicové konektory
- Přenosná taška

Poznámka:

Pro katetrizaci doporučujeme použít katétrů pouze s jedním nebo dvěma navzájem opačnými sacími očky. Lze použít silikonový i PVC katétr. Doporučujeme následující katétrů:

- Zúžení močovodu v poloze „otevřený“ = 16 CH katétr nebo 14 CH balónkový katétr
- Zúžení v poloze „částečné zúžení“ = 14 CH katétr nebo 12 CH balónkový katétr

Nepoužívejte katétrů se zahnutou špičkou!

Tip:

Podle směrnic pro správnou katetrizaci, a to i během simulace, by měl být močovod lubrikován lubrikačním gelem (není obsažen v sadě) pro zajištění hladkého zavedení katétru. Lubrikační gel lze také nanést na špičku katétru.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše